

AT51004

DREIRAD ROLLATOR



Rollator AT51004

Produktspezifikation

Der Dreirad-Rollator AT51004 wurde als Geh- und Erholungshilfe sowie zum Transport von kleinen gekauften Gegenständen entworfen und kann sowohl draußen als auch innen, auf flachem Untergrund von gehbehinderten Personen mit dem untenstehenden maximalen Gewicht verwendet werden.

Es ist wichtig, dass der Benutzer die Sicherheitsanweisungen liest und versteht, bevor er das Gerät verwendet, um eventuelle Verletzungen vom Benutzer und von Dritten sowie von dem Rollator und von umstehenden Gegenständen zu vermeiden.

Konformitätsstandard


Das Gerät ist nach BS E3\J ISO 11199-2:2005 geprüft.

Produktstruktur

AT51004 besteht aus Handgriffen, regulierbare Feststell- und Betriebsbremse, Nylon-Rückenlehne, Sitzfläche, in der Höhe verstellbar, Einkaufstasche, Vorderrad und Hinterräder.

Bestandteile

1. Handgriffe, 2. Feststell-/Betriebsbremse, 1 Griffrohrführung, 4. Feststellschraube für Höhenverstellung der Griffe, 5. Bremsbezüge, 6. Hinterräder 7. Faltmechanismus . 8.Vorderrad, 9. Sitzfläche, 10. Einkaufstasche 11. Nylon-Rückenlehne

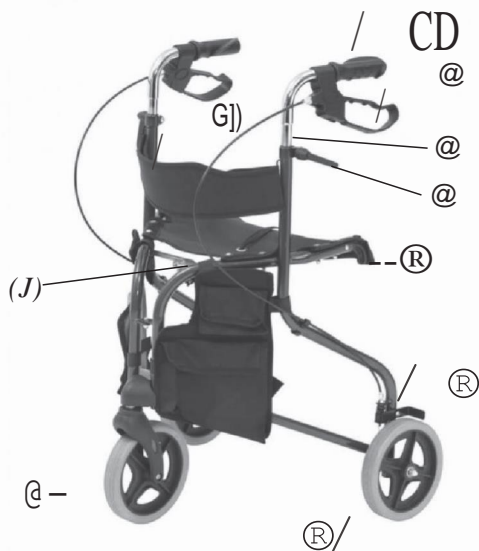

Verwendungszweck

Der Rollator dient als Geh- und Erholungshilfe, sowie zum Transport von kleinen gekauften Gegenständen und kann sowohl draußen als auch drinnen verwendet werden.

Arbeitsbedingungen

Außentemperatur -20°C Relative Luftfeuchtigkeit 85%;

Atmosphärendruck 850hPa:1050hPa;

Technische Daten

Bestandteile	Größe
Breite zwischen den Handgriffen	33cm
Sitzhöhe	50cm
Niedrigste Griffhöhe	82cm
Höchste Griffhöhe	99cm
Durchmesser Räder	8'
Breite zwischen den Hinterrädern	58cm
Abstand zwischen Vorder- und Hinterrad	49cm
Max. Belastbarkeit des Rollators	136KG
Gewicht	6,250KG

Lieferumfang:

Dreirad-Rollator aus Stahl

Bedienungsanleitung

Einkaufstasche

Bedienungsanleitung

1. Entfernen Sie die Verpackung und ziehen Sie alle Bestandteile heraus. Stecken Sie die Griffe hinein und drehen Sie diese um, um die Stabilität des Rollators einzustellen.

2. Öffnen Sie den Rollator und drücken sie den Schnellverschluss am Faltmechanismus bis zum Anschlag. Der Faltmechanismus muss mit einem Geräusch einrasten, so können Sie sich sicher sein, den Rollator verriegelt zu haben.

Falten Sie den Rollator, indem Sie an dem Gurt in der Mitte des Sitzes schwingvoll ziehen, siehe Bild unten.



Drücken Sie die Sellen auseinander

Öffnen des Rollators



Ziehen Sie den Gurt, um den Rollator zu falten

Falten des Rollators

3. Die Handgriffe des Rollators können in der Höhe eingestellt werden, um sich der Größe des jeweiligen Benutzers anzupassen. Schrauben Sie die Klemmschraube auf, stellen Sie den Griff auf die gewünschte Höhe ein und schrauben Sie die Klemmschraube wieder zu. Wiederholen Sie den gleichen Prozess auf der Gegenseite und achten Sie bitte darauf, dass vor der Benutzung die beiden Handgriffe auf der gleichen Höhe eingestellt sind.
4. Zum Feststellen der Bremsen, müssen die Bremshebel nach unten gedrückt werden. Zum Lösen der Feststellbremse, müssen Sie die Hebel wieder hochziehen.

Wartung und wichtige Anmerkungen

1. Benutzen Sie bitte zur Reinigung keine ätzenden Reinigungsmittel.
2. Benutzen Sie weder Säure noch alkalische Lösungen oder Poliermittel.
3. Das Gerät darf nicht bei Regen draußen gestellt werden.
4. Gehen Sie während der Montage sorgfältig vor. Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie bitte Ihre Finger von den Geräteteilen bei der Drehposition bzw. bei der Fixierung der Sitzfläche, weit entfernt.
5. Während anderer Tätigkeiten betätigen Sie bitte die Bremse um ein Rutschen zu vermeiden. Bitte hängen Sie keine Gegenstände auf der linken oder rechten Seite des Rollators an, um eine Unstabilität oder ein Schwenken des Rollators zu vermeiden.
7. Vor Lagerung klappen Sie das Gerät zusammen.

Transport und Lagerung

1. AT51004 kann verpackt mit beliebigem Transportmittel transportiert werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei der Aussetzung der Witterung nicht durch chemische Stoffe oder Erosion beschädigt wird.
2. Lagerungsbedingungen: -40° C 60°a relative Luftfeuchtigkeit: 93%; 500h
Luftdruck Pa 1050hPa
3. Lagerungsanforderung: keine korrosiven Gase und gut belüfteter Raum.

ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, ul. Zawislanska 43
Tel. 0048 22 518 36 00, Fax 0048 22 518 36 30
www.antar.net e-mail:antar@antar.net



WARNUNG:

Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls in Bezug auf das Medizinprodukt, der direkt oder indirekt zu einer der folgenden Ursachen geführt hat oder führen könnte:

- a) den Tod eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person,
- b) die vorübergehende oder dauerhafte ernsthafte Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person;
- c) eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit;

Der oben genannte schwerwiegende Vorfall ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer und/ oder Patient ansässig ist.

WARNUNG:

Bei Schmerzen, allergischen Reaktionen oder anderen besorgniserregenden Symptomen, die für den Benutzer unklar sind und in Bezug auf das Medizinprodukt aufgetreten sind, sollte der Benutzer einen Arzt konsultieren.

SICHERE ENTSORGUNG DES MEDIZINISCHEN GERÄTS

Wenn das Gerät außer Betrieb genommen wurde, kann es mit Ausnahme von elektrischen Medizinprodukten als Siedlungsabfall behandelt werden. In diesem Fall muss das elektrische medizinische Gerät auf die vom Gesetz für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott beschriebene Weise entsorgt werden.

INFORMATION:

Dieses Symbol bedeutet: "Maximales Benutzergewicht"