

GARANTIEKARTE

Modell:

Seriennummer:

Siegel der Verkaufsstelle

und leserliche Unterschrift des Verkäufers:

- 1) AN TAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43 gewährt hiermit 12 Monate Garantie für das Produkt ab dem Kaufdatum des Produkts durch den Käufer. Bei Produkten, deren Kauf vom Nationalen Gesundheitsfonds erstattet wird, verlängert sich die Garantiezeit und umfasst die Hälfte der in der Verordnung über garantierte Leistungen angegebenen Nutzungsdauer, sofern die Nutzungsdauer in der Verordnung in Monaten oder Jahren angegeben ist.
- 2) Während der Garantiezeit verpflichtet sich AN TAR Reparaturen, die zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Funktionierens des Produkts erforderlich sind, innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Eingangs des Produkts beim Service zusammen mit dem Kaufnachweis und der Garantiekarte durchzuführen.
- 3) AN TAR behält sich das Recht vor, das Produkt zu ersetzen, falls die Reparaturkosten als nicht rentabel angesehen werden. Die Reparatur oder der Austausch defekter Produkte verlängert die Garantiezeit nicht.
- 4) Wenn eine Fehlfunktion des Produkts festgestellt wird, senden Sie es sofort an die Adresse von AN TAR (unter Punkt 1 angegeben) oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.
- 5) Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie ihre Bestimmungen. Die Verwendung des Produkts entgegen seiner beabsichtigten Verwendung und Empfehlungen führt zu einem unwiderruflichen Verlust der Garantie.
- 6) Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere mechanische Kräfte, eine Last, die das in der Anleitung beschriebene maximal zulässige Gewicht des Benutzers überschreitet, sowie den Kontakt des Produkts mit Alkohol, Fettstoffen oder Benzin verursacht werden. Die Garantie gilt nicht für Teile, die während des Gebrauchs normalem Verschleiß ausgesetzt sind, wie Lager, Gummielemente und andere.
- 7) Das im Zusammenhang mit der Reklamation auf der Website bereitgestellte Produkt darf keine Epidemie verursachen.
- 8) DIESE GARANTIE GILT NUR MIT DEM KAUFNACHWEIS (RECHNUNG, STEUERBELEG, MEHRWERTSTEUERRECHNUNG). IM FALLE EINER REKLAMATION MUSS DER KAUFNACHWEIS BEIGEFÜGT WERDEN. UM DIE VERLÄNGERTE GARANTIEZEIT FÜR PRODUKTE ANZUERKENNEN, DEREN KAUF VON DER KRANKENKASSE ERSTATTET WURDE, MÜSSEN SIE EINE KOPIE DES AUFTRAGS FÜR DIE LIEFERUNG VON MEDIZINPRODUKTEN, DIE ORTHOPÄDISCHE GERÄTE UND HILFSMITTEL SIND, BEIFÜGEN.
- 9) Reklamationen, die ohne Kaufnachweis und Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts eingereicht wurden, werden nicht berücksichtigt.



ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43
Polen
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net E-Mail: antar@antar.net



Ausgabedatum der Anleitung: 25.02.2022

v1-2 25.02.2022

BENUTZERHANDBUCH Wanderer AT51018



LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH

Ein Aluminium-Vierrad-Klappständer, ausgestattet mit zwei vollwertigen Hinterrädern und zwei vorderen Schwenkrädern und einer Bremse mit Blockade. Der Rollator ermöglicht eine einfache Bewegung auf jeder Oberfläche, innerhalb und außerhalb des Gebäudes. Das Produkt ist mit einem weichen PVC-beschichteten Sitz, klappbaren Fußstützen und doppelseitigen Griffen ausgestattet. Der Rahmen ist mit einer Aluminiumschale bedeckt.

WARNUNGEN

Prüfen Sie vor Beginn jeglicher Arbeiten den Zustand des Geräts. Wenn das Produkt funktioniert oder ungewöhnlich aussieht, wenden Sie sich bitte umgehend an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Antar Sp. Jawna ist nicht verantwortlich für die unsachgemäße Verwendung des Geräts.

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Das maximale Benutzergewicht von 120 kg darf nicht überschritten werden.
2. Der Rollator darf nicht auf herkömmlichen Treppen und Rolltreppen verwendet werden.
3. Versuchen Sie nicht, die Gehhilfe zu schieben, wenn eine Person auf dem Sitz sitzt.
4. Der Sitz darf nicht zum Transport von Personen und Gütern verwendet werden.
5. Der Sitz kann nicht ohne umgeklappte Rückenlehne verwendet werden.
6. Setzen Sie sich nicht auf den Sitz, wenn die Gehhilfe auf einer geneigten Oberfläche steht.
7. Der Rollator ist nur als Gehhilfe bestimmt.
8. Die Gehhilfe darf nur mit bestimmten Zubehör- und Ersatzteilen verwendet werden.
9. Artikel dürfen nur im Korb transportiert werden. Hängen Sie keine schweren Gegenstände an die Griffe des Gehwagens, da dies die Stabilität des Gehwagens beeinträchtigen kann.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

1. Stellen Sie sicher, dass die Gehhilfe vor Gebrauch zerlegt wurde.
2. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob die Bremsen funktionieren.
3. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile in gutem Zustand und bewegliche Teile funktionstüchtig sind.
4. Sie dürfen nicht fahren, während Sie auf dem Sitz sitzen. Eine unsachgemäße Verwendung des Gehwagens kann zu schweren Verletzungen des Benutzers und / oder zu Schäden am Rahmen oder an den Rädern des Gehwagens führen.
5. Der Gehwagen darf nicht zum Rückwärtsgehen verwendet werden.
6. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Bordsteine und andere Hindernisse überwinden und wenn Sie den Gehwagen auf geneigten, unebenen oder rutschigen Oberflächen verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.
7. Während der Gehhilfe in Gebrauch ist, dürfen keine Einstellungen vorgenommen werden.
8. Seien Sie vorsichtig, wenn sich schwere Gegenstände im Korb befinden (max. Gewicht 5 kg).
9. Alle Räder müssen immer Bodenkontakt haben..

VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

1. Produkt gefaltet verpackt, Korb getrennt. Nach der Entnahme aus der Verpackung sollte die Gehhilfe durch Blockieren der horizontalen Spreizscharniere aufgeklappt werden.
2. Klappen Sie dann den Sitz auf, montieren Sie die Griffe und den Korb.
3. Passen Sie die Höhe der Griffe an.

Aufmerksamkeit:

Beim Gebrauch und Umgang mit dem Rollstuhl sowie beim Zusammenklappen und Einstellen der Mechanik besteht die Gefahr des Einklemmens und / oder Einklemmens von Körperteilen des Benutzers / der Begleitperson in Öffnungen / Lücken zwischen den Bauteilen.

Diese Schritte sollten mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden.

Stabilisieren Sie nach Abschluss der Einstellung die Position durch vorsichtiges Anziehen der Muttern / Schrauben.

Um sicher in den Rollator ein- und auszusteigen, müssen Sie die Laufdrabremsen anziehen.

KONTRAINDIKATIONEN

Körperliche oder geistige Einschränkungen (z. B. Sehbehinderung), die den sicheren Umgang mit dem Produkt verhindern.

WARNUNG:

Bei Schmerzen, allergischen Reaktionen oder anderen besorgniserregenden Symptomen, die für den Benutzer unklar sind und in Bezug auf das Medizinprodukt aufgetreten sind, sollte der Benutzer einen Arzt konsultieren.

VERWENDUNG DER BREMSEN

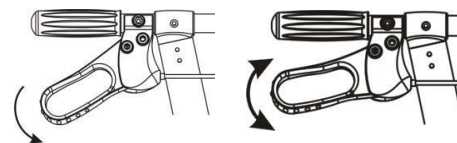


Abb. 1 Feststellbremse verriegelt.

Abb. 2 Feststellbremse entriegelt.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Halten Sie den Walker von Lichtquellen, hohen Temperaturen und Feuchtigkeit fern. Vermeiden Sie es, den Rollator direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.

Entsorgen Sie den Rollator gemäß den geltenden Umweltschutz- und Recyclingvorschriften.

Lebensdauer: 5 Jahre ab Produktionsdatum.

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch immer, dass sich die Griffe in der richtigen Höhe befinden und richtig befestigt sind. Um Sturzgefahr zu vermeiden, darf der Rollator nicht auf unebenen oder geneigten Flächen verwendet werden. Überprüfen Sie den Zustand der Räder und Bremsen. Überprüfen Sie abschließend die Gesamtstabilität des Rahmens.

Stabilisieren Sie nach Abschluss der Einstellung die Position durch vorsichtiges Anziehen der Muttern / Schrauben.

WARTUNG UND REINIGUNG

Entfernen Sie nach jedem Gebrauch jeglichen Schmutz mit milden Reinigungsmitteln und lassen Sie ihn dann trocknen. Keine scharfen, scheuernden Schwämme verwenden. Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der Bremsen, den Zustand der Dichtungen der Befestigungselemente und den Zustand der Schweißnähte.

Aufmerksamkeit:

Beim Gebrauch und Umgang mit dem Rollstuhl sowie beim Zusammenklappen und Einstellen der Mechanik besteht die Gefahr des Einklemmens und / oder Einklemmens von Körperteilen des Benutzers / der Begleitperson in Öffnungen / Lücken zwischen den Bauteilen.

Hängen oder befestigen Sie keine Gegenstände am Rollator. Andernfalls kann es zu Verletzungen (z. B. bei einem Sturz) und/oder Produktschäden kommen.

Benutzergewicht	120 kg
Sitzdicke	4 cm
totale Breite	61 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitzhöhe vom Boden	53 cm
Bereich der Höhenverstellung der Griffe	78–89 cm
waga	9 kg

INFORMATION:



Dieses Symbol bedeutet: "Maximales Benutzergewicht"

WARNUNG:

Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls in Bezug auf das Medizinprodukt, der direkt oder indirekt zu einer der folgenden Ursachen geführt hat oder führen könnte:

- a) den Tod eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person,
 - b) die vorübergehende oder dauerhafte ernsthafte Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person;
 - c) eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit;
- Der oben genannte schwerwiegende Vorfall ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer und / oder Patient ansässig ist.